


Cylinder miarowy PMP wysoki ze skalą klasa A



Przeznaczenie

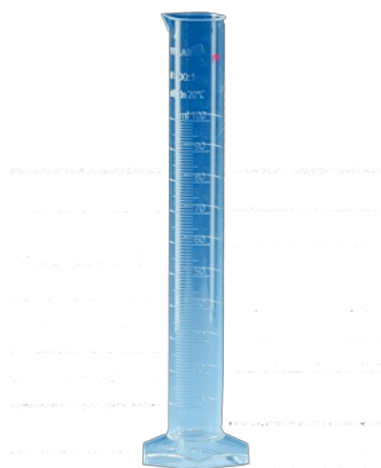

- Krystalicznie czyste
- Cylinder PMP
- Wysokość 145-482 mm

Charakterystyka

Cylinder miarowy z profilowanymi podziałkami i znakami pierścieniowymi w punktach skali podstawowej, kalibrowane "In". Dostarczony certyfikat zawiera numer partii i faktyczną wartość nominalną ustaloną w warunkach testu. Odchylenia od wartości nominalnej mieszczą się w dopuszczalnych tolerancjach klasy A zgodnie z DIN 12681 i ISO 6706. Cylinder posiada numer serii wygrawerowany laserem i rok produkcji. Sześciokątna podstawa z dolnymi kołkami zapewnia wysoką stabilność. Naprężenie termiczne do 121 ° C (autoklawowanie) nie powoduje trwałego przekroczenia granic tolerancji. Dostępne również z certyfikatem kalibracji DAkkS lub indywidualnym certyfikatem jakości.

Dostępne modele

Model	Pojemność
CMPPA10	10 ml
CMPPA25	25 ml
CMPPA50	50 ml
CMPPA100	100 ml
CMPPA250	250 ml
CMPPA500	500 ml
CMPPA1000	1000 ml
CMPPA2000	2000 ml

